



INDERMIL® flexifuze™ huidlijm is gebruikt om uw wond te sluiten. In deze folder vindt u een aantal aanbevelingen voor de verzorging hiervan.

Product

INDERMIL® flexifuze™ is een huidlijm, die bij u is gebruikt om de huid pijnloos te sluiten. De huidlijm zorgt, net als hechtingen, voor een sterke breukbestendige en soepele wondbedekking. De wondgenezing verloopt net als onder een natuurlijke wondkorst.

INDERMIL® flexifuze™ wordt als vloeistof op de huid aangebracht. Deze begint hard te worden zodra ze in contact komt met de huid. Wanneer de lijm volledig droogd is, kan deze er gerimpeld uitzien, dit is volkomen normaal.



Wondverzorging

De wond dient zo droog mogelijk gehouden te worden tot de huidlijm na 5-8 dagen vanzelf loslaat. U mag wel kort douchen of de wond voorzichtig baden.

Vermijd het direct schrobben van de wond en het langdurig in water houden (inclusief zwemmen) tot de huidlijm loslaat en de wond geheeld is.

Trek of pulk niet aan de wond of de huidlijm. Smeer geen medicijnen of crèmes op de wond. Houd eventueel de wond droog met een niet-hechtend en waterafstotend verband, volgens doktersinstructie.

Meld elk ongemak of andere zorg met betrekking tot uw wond bij uw dokter.




INDERMIL® flexifuze™ has been used to close your wound, the information contained within this leaflet will help you understand this closure method.

Product

Indermil® flexifuze™ is a tissue adhesive and can be used as an alternative to other closure methods such as sutures and staples.

Indermil® flexifuze™ is applied to the skin as a liquid which immediately begins to harden on contact with the surface of the skin. When fully dry, the adhesive will appear wrinkled, this is perfectly normal.

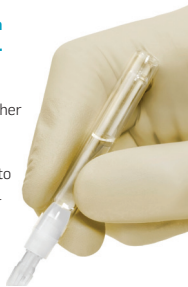

Wound treatment

The wound should be kept as dry as possible until the adhesive barrier sloughs off in 5 – 8 days allowing for only occasional contact with water. Patients may immediately take a short shower and bathe the wound site gently. Avoid scrubbing the wound site directly or excessive soaking in water (including swimming) until the adhesive barrier sloughs off and the wound site heals. Do not pull or pick at the wound or bandage. Do not apply any medications or cream to the wound. Keep the wound dry with a non-stick, non-medicinal and water resistant bandage, per your doctor's instructions.

Report any discomfort or other concerns regarding your wound to your doctor.